





ご使用中の輸液セットでも

外さない投与が可能に

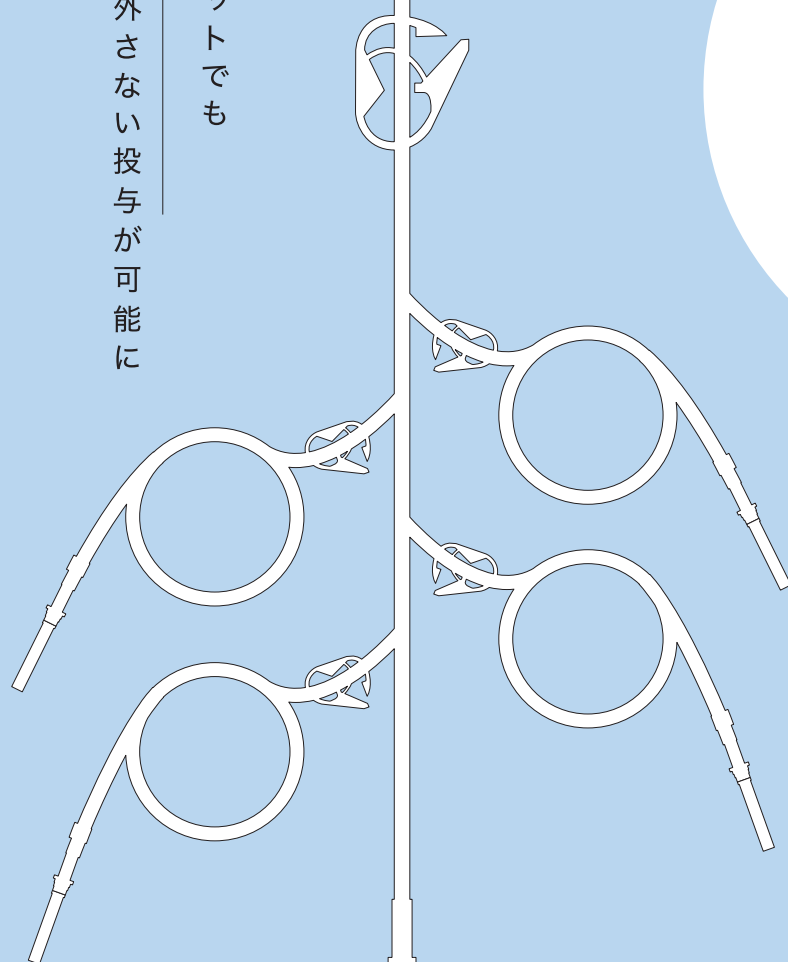

外さないから

曝露しない

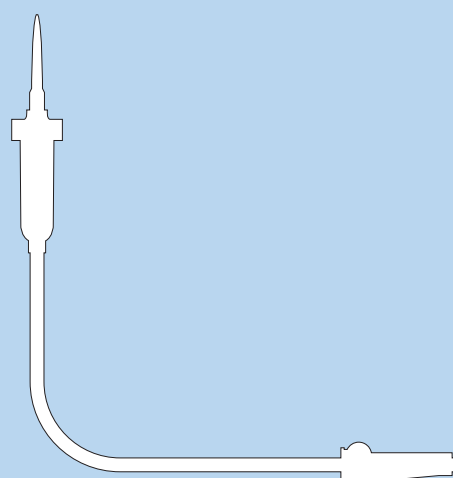

抗がん薬投与用 一体型接続セット





アンティリーク ク라운の特長

互換性

輸液ポンプメーカー純正輸液セットとの併用で外さない投与を可能にします

簡便性

付属の「疎水フィルターキャップ」を純正輸液セットに取り付けることで、オートプライミング機構を可能にします

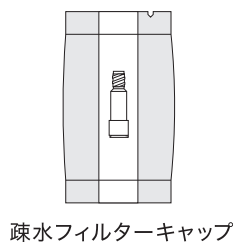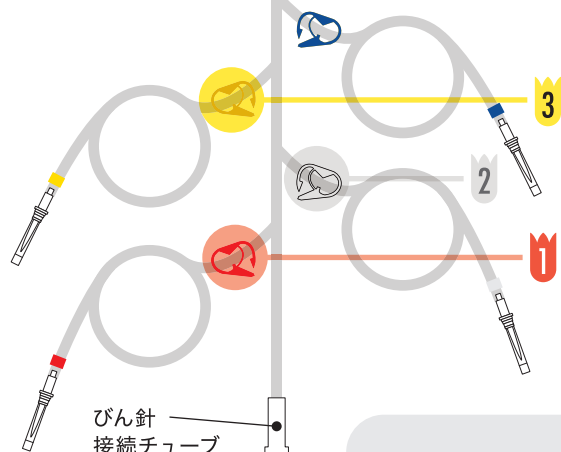

側管の使用順が直観的に分かるカラーリング



側管は童謡『チューリップ』の“♪赤・白・黄色～”という歌詞の通りに色分けをしています。
一剤目は赤色の側管というように、下から順にお使いください。
だれもが、いつでも、同じように作業できる工夫です。

“外さない”という曝露対策

■ 抗がん薬投与後、接続部を外さないため薬液の漏出がない。

医療安全への配慮

■ 側管クランプの色分けにより投与手順の標準化が可能。
■ 一体型は感染リスク対策にも効果的。

業務の効率化

■ オートプライミング機構により容易に投与準備が完了。

アンティリーク ク라운 製品種類

Crown - ク라운 -	
シール/側管数	型式
 4本	AL-CW4
 2本	AL-CW2

アンティリーク ク라운 製品仕様

チューブ材質	ポリ塩化ビニル (DEHPフリー)
メインルート全長	330mm
側管チューブ長	下流側から、 525mm・500mm・475mm・450mm
包装単位	12個 / 箱
販売名: AL接続セット 一般名称: 輸液用延長チューブ クラス分類: 一般医療機器	製品名: アンティリーク ク라운 医療機器届出番号: 09B1X00004000164

販売元



メディキット株式会社

販売元: メディキット株式会社
〒113-0034 東京都文京区湯島1-13-2
TEL. 03-3839-0201

営業所: 東京・札幌・仙台・埼玉・千葉・八王子・横浜・金沢
名古屋・京都・関西・神戸・広島・松山・福岡・宮崎
<http://www.medikit.co.jp/>

製造販売元



フォルテ グロウ メディカル 株式会社

〒327-0003 栃木県佐野市大橋町1647番地
<http://www.fgm.co.jp>