

血栓吸引除去用カテーテル(下肢動脈用)



アスピレアキャス
Aspirare Cath

血栓吸引除去カテーテル

- ▶ 吸引のための広い内腔をもつOTWタイプの血栓吸引除去カテーテルです。
- ▶ 良好な吸引性能と吸引力維持のため、剛性のあるシャフトで設計されています。
- ▶ 血栓吸引に適したカテーテル先端形状をラインアップし、先端のエックス線不透過マーカが透視下での先端部視認性を向上させます。
- ▶ "クランク形状"は血管と同軸性を保ちながら吸引が可能です。




外径 2.03mm 内径 1.65mm (0.065inch)



【キット内容】



エクステンションチューブ

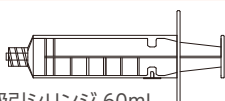

吸引シリンジ 60mL



吸引血液濾過用フィルター ×2



一方活栓

製品コード	品番	適合ガイドワイヤー最大径	有効長 (cm)	コート長 (cm)	先端形状	JANコード	
TH0002	THS60SBS2	0.038" (0.97mm)	65	60	MI1	4543527215039	
TH0006	THS60SCS2		100				4543527255387
TH0007	THS60SBS2		65			CRANK	4543527255394
TH0008	THS60SCS2		100				4543527255400

保険医療材料請求区分: 血管内手術用カテーテル (9) 血栓除去用カテーテル 経皮的血栓除去用 販売名: アスピレアキャス
医療機器承認番号: 22000BZZ00003000 JMDNコード: 10714004

ご使用前に製品の電子添文を確認の上、記載されている説明に従って正しく使用してください。



メディキット株式会社

販売元: メディキット株式会社 〒113-0034 東京都文京区湯島 1-13-2 TEL.03-3839-0201
 製造販売元: 東郷メディキット株式会社 〒883-0062 宮崎県日向市大字日知屋字亀川 17148-6 TEL.0982-53-8000
 営業所/東京・札幌・仙台・埼玉・千葉・八王子・横浜・金沢・名古屋・京都・関西・神戸・広島・松山・福岡・宮崎
 流通倉庫/宮崎県日向市・千葉県佐倉市
<http://www.medikit.co.jp/>
<http://www.togomedikit.co.jp/>