

Thin-Wall Design

スーパーシース Coat Plus®

TRA・DRA用

- ✦ 親水性コートによるスムーズな挿入を実現
- ✦ 独自の加工技術によるシャープなシース先端形状




メディキット株式会社

Thin-Wall Design

スーパーシース Coat Plus®

TRA・DRA用

- シース外面の親水性コートによるスムーズな挿入
- シース基側2cmには親水性コートを施さず、挿入したシースがずれにくくなるように設計し、カテーテルの操作性をバックアップ
- シース基とシースチューブを一体化したインサート構造によりデバイス挿抜抵抗を低減
- 従来より穿刺性を高めた22Gセルジンガー針と0.025"GWをセット

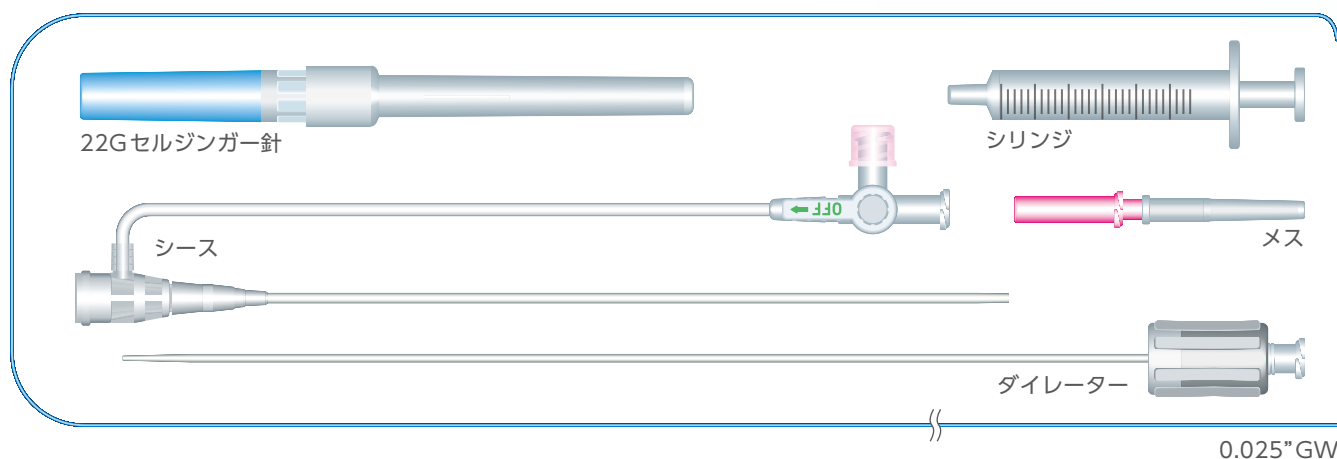

製品規格表

製品コード	品番	シースサイズ	シース有効長	親水性コート長	付属GW	付属セルジンガー針	JANコード*	保険医療材料請求区分
IS1024	IC40Z17PSMT	4Fr	17cm	先端 15cm	0.025" × 80cm	22G (有効長 22mm)	4543527239172	001血管造影用シース イントロデューサーセット (1)一般用①標準型
IS1025	IC50Z17PSMT	5Fr					4543527239189	
IS1026	IC60Z17PSMT	6Fr					4543527239196	
IS1027	IC70Z17PSMT	7Fr					4543527239202	
IS1041	IC40Z25PSMT	4Fr	25cm	先端 23cm			4543527239547	001血管造影用シース イントロデューサーセット (2)蛇行血管用
IS1042	IC50Z25PSMT	5Fr					4543527239554	
IS1043	IC60Z25PSMT	6Fr					4543527239561	
IS1044	IC70Z25PSMT	7Fr					4543527239578	

販売名: メディキットスーパーシース
 医療機器承認番号: 20200BZZ00114000
 一般の名称: 心臓用カテーテルイントロデューサキット
 クラス分類: IV

(5本/箱)

ご使用前に製品の電子添文を確認の上、記載されている説明に従って正しく使用してください。



メディキット株式会社

販売元: メディキット株式会社 〒113-0034 東京都文京区湯島 1-13-2 TEL.03-3839-0201
 製造販売元: 東郷メディキット株式会社 〒883-0062 宮崎県日向市大字日知屋字亀川 17148-6 TEL.0982-53-8000
 営業所/東京・札幌・仙台・埼玉・千葉・八王子・横浜・金沢・名古屋・京都・関西・神戸・広島・松山・福岡・宮崎
 流通倉庫/宮崎県日向市・千葉県佐倉市
<http://www.medikit.co.jp/>
<http://www.togomedikit.co.jp/>

2024.07
20240805SH102-1